

SET DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO

CÓD. 130

Indicado para el drenaje de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) y para todas las instancias en que se requiera monitoreo de la presión (PIC); para la descompresión de los ventrículos cerebrales, en pacientes con traumatismo craneoencefálico y en pacientes con accidentes cerebro vasculares, y disminuir la presión Intracraneana (PIC).

- // Conector luer lock.
- // Mandril - guía de acero inoxidable.
- // El sistema cerrado minimiza el riesgo de infección.
- // Fácil regulación de drenado.
- // El set incluye: 1 tunelizador de acero inoxidable (A), válvula anti-retorno (B), medidor volumétrico rígido con indicadores de valores de presión (c), aleta anti-acodamiento (D), conector con aleta para fijación (E), conector en "Y" (F) y 2 bolsas de recolección (G).



(D)

Aleta anti-acodamiento.




(E)

Conector con aleta para fijación.



(C)

Catéter multiperforado y extremo distal cerrado.

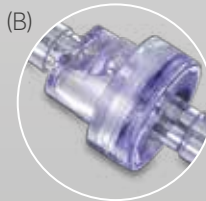


(B)

Válvula anti-retorno.



(F)

Nuevo conector en "Y" para toma de muestras y administración de medicamentos.

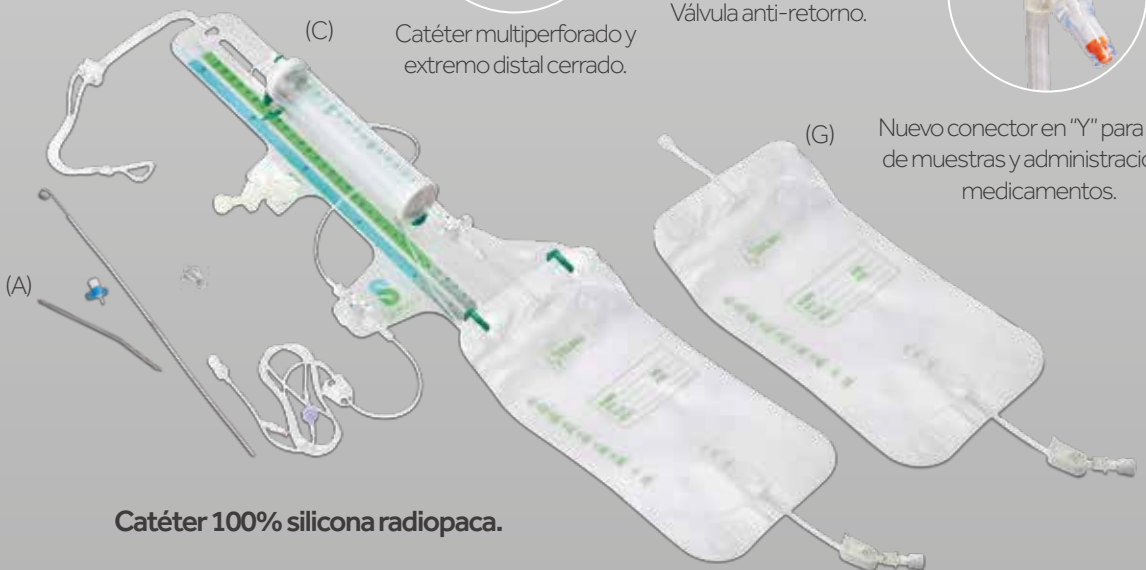

Catéter 100% silicona radiopaca.

Código	CH/FR	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
130-09	9,0	3,00	1,75	30,00