



WWW.SILMAG.COM.AR



PICC CATÉTER PARA CANALIZACIÓN ENDOVENOSA

Folleto informativo

WWW.SILMAG.COM.AR

info@silmag.com.ar | (+54) 0358 4970205
Sarmiento 355 | Las Hígueras | Córdoba | X5805BTG



-Certificado de Inscripción y Autorización de funcionamiento de Empresa Fabricante e Importadora de Productos Médicos. Disposición N° 4884/12. Legajo N° 229.
-Certificado de Cumplimiento de las



BSI British Standards Institution
Quality Management System
N° FM 664794
ISO 13485




23/10/17 Rev.05

Producto autorizado por la A.N.M.A.T. PM-229-28

Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.


- // Catéter ecogénico
- // Permite la administración de soluciones hiperosmolares.
- // Gran resistencia mecánica, el PICC supera en más del doble los estándares estipulados en la norma ISO 10555-1.
- // Unión segura, con superficie de apoyo óptima para fijación.
- // Dimensiones y lúmenes adecuados para recién nacidos de muy bajo peso, prematuros extremos y pediátricos.

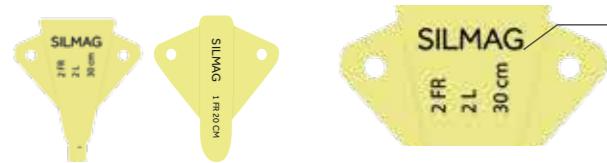

Información de calibre y longitud.

Esc. 1:1

// **Extremo redondeado**, evita la rotura de la vena. **Punta pintada** para verificar la extracción total del catéter.

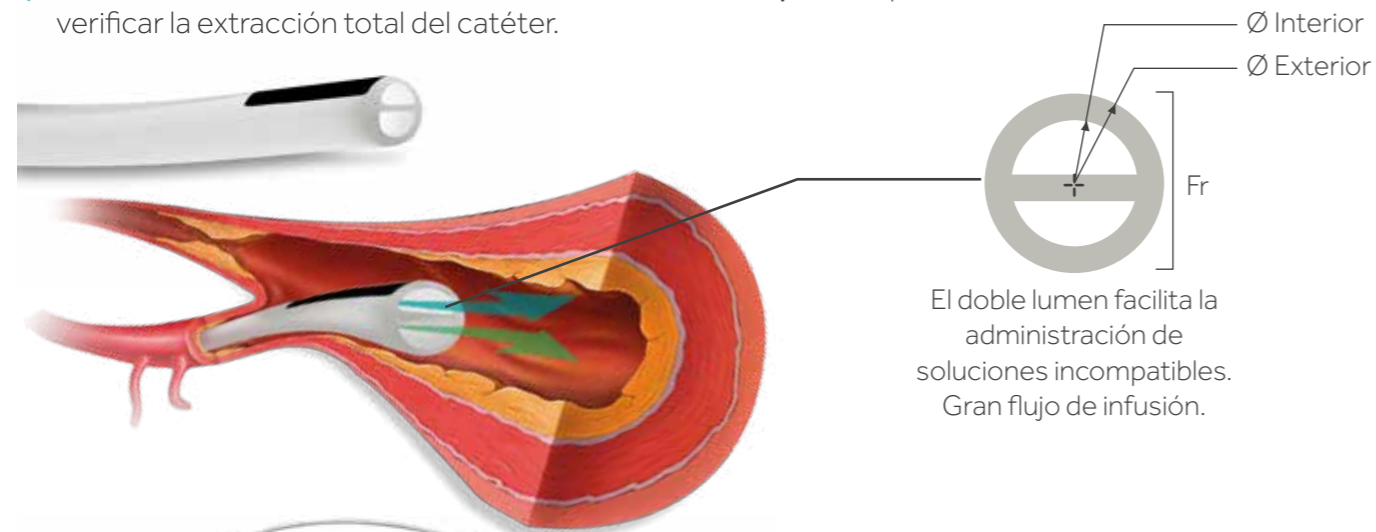


El doble lumen facilita la administración de soluciones incompatibles. Gran flujo de infusión.

Diferenciación de colores.

Catéter 100 % poliuretano con marcación cada centímetro para verificar una correcta colocación.

Catéter simple y doble lumen.

// Introdutor pelable. Aguja con ojo lateral y vaina transparente para verificación de retorno venoso sanguíneo.

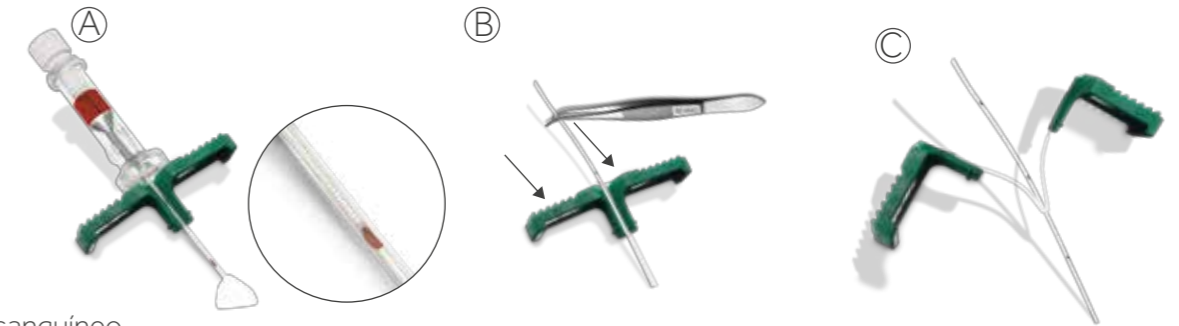

Retorno sanguíneo

- // El set incluye:
- Conectores needle free (libre de aguja) (A) (la cantidad depende del versión),
 - 1 cinta métrica descartable (B),
 - 1 lazo hemostático de silicona (C),
 - 1 pinza metálica (D),
 - 1 introductor pelable (E).



Simple lumen			
Código	CH/FR	Ø Exterior x Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
581-01-15-S	1,0	0,36x0,17	15
581-01-20-S	1,0	0,36x0,17	20
581-02-15-S	2,0	0,60x0,30	15
581-02-30-S	2,0	0,60x0,30	30
581-03-30-S	3,0	1,00x0,50	30
581-03-60-S	3,0	1,00x0,50	60
581-04-30-S	4,0	1,40x0,80	30
581-04-60-S	4,0	1,40x0,80	60
581-05-60-S	5,0	1,70x1,20	60

Doble lumen			
Código	CH/FR	Ø Exterior x Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
581-02-20-D	2,0	0,60x(0,20x2)	20
581-02-30-D	2,0	0,60x(0,20x2)	30
581-03-50-D	3,0	1,00x(0,30x2)	50
581-04-60-D	4,0	1,40x(0,40x2)	60

* La medida de 1,0 FR no incluye introductor pelable