




SISTEMA CPAP SNORKEL CÓD. 233-S




Producto diseñado para la administración de mezcla de aire/oxígeno con presión positiva en pacientes lactantes y pediátricos con respiraciones espontáneas.


- // Permite mantener armado el equipo del respirador para situaciones de emergencia.
- // Permite una distribución uniforme del calor, por lo que impide que este se pierda y que se acumule condensación.
- // Se puede utilizar con ventiladores de 1 rama ideal para traslados.
- // Garantiza un nivel de humedad óptimo.
- // La cinta hidrocoloide minimiza el riesgo lesiones de tabique por presión.
- // Kit: cánula de silicona, conector de 15 mm., conector 90° doble, línea de monitoreo de presión, sujetador de cánula, cinta hidrocoloide con velcro y cinta de sujeción.

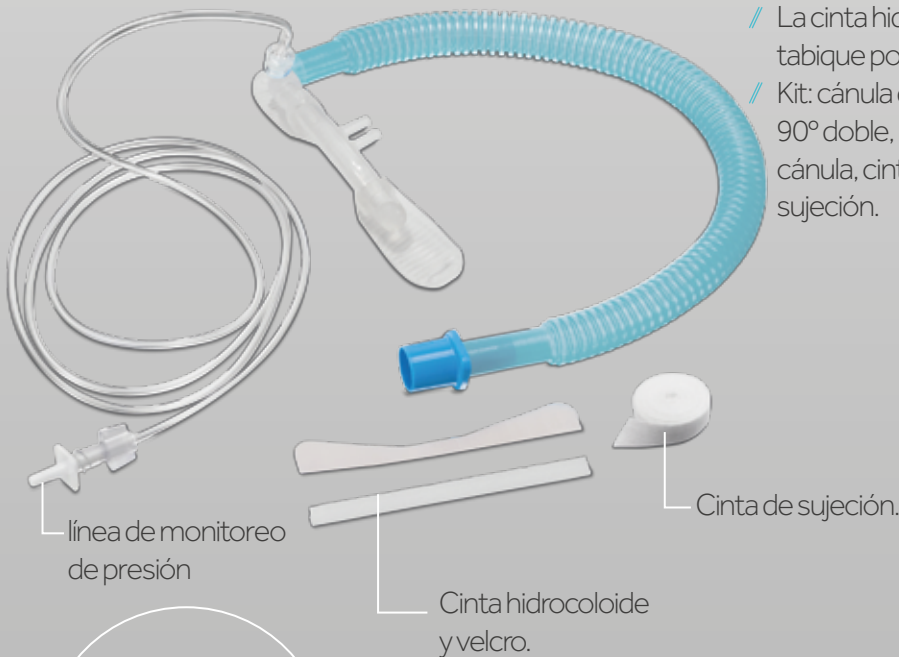

Cánula 100 % silicona.
Adaptable a fosas nasales.

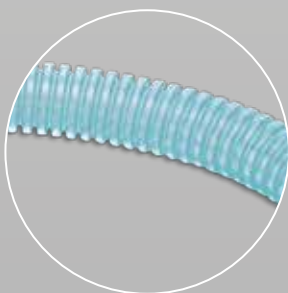

Tubo corrugado.
Permiten movilidad sin riesgo de acodamiento.

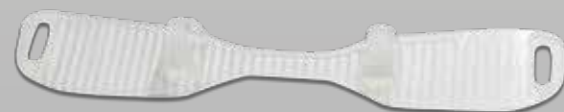

Sujetador de cánula 100 % silicona.
Mejora la sujeción y reduce el riesgo de lesión por presión.

Código	Calibre (FR)	Ø exterior cánula (mm)	Separación entre cánulas (mm)	Largo cánulas (mm)	Recomendación s/ peso del paciente
233-S0	8,0	2,70	2,70	9,00	Menos de 1000 g
233-S1	10,0	3,30	2,70	9,00	De 1000 a 1500 g
233-S2	12,0	4,00	4,00	10,00	De 1500 a 2000 g
233-S3	15,0	5,00	4,50	12,50	De 2000 a 3000 g