



# CÁNULA

## PARA TRAQUEOSTOMÍA (PEDIÁTRICO)

CÓD. 270




Producto diseñado para mantener la permeabilidad de la vía respiratoria en pacientes pediátricos y neonatos con epiglotitis, neoplasia, absceso o cuerpo extraño en faringe que produce obstrucción total o parcial de las vías respiratorias altas, traumatismo laringotraqueal grave, malformaciones y para pacientes con hipertrofia de subglotis.

- // No produce lesiones por presión.
- // Bajo perfil, para lograr una mayor comodidad del paciente.
- // Sujetador reforzado. Garantiza el correcto posicionamiento de la cánula.
- // Menor riesgo de obstrucción por acumulación de secreciones.
- // Incluye cinta para fijación. Logra una óptima colocación.

### 100% silicona radiopaca.


Cánula fabricada en una pieza, aumentando la seguridad del producto y su manipulación.

**Evita la desconexión accidental.**

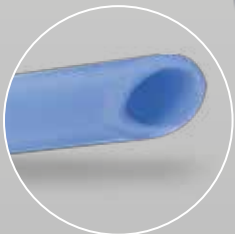


Bisel redondeado atraumático.


Facilita la colocación sin la necesidad de utilizar un mandril, obturador o guía, el cual restringiría parcialmente la ventilación durante el procedimiento de colocación.

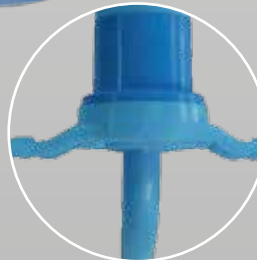

Rebaje para reducir la superficie de contacto de la cánula con el ostoma.

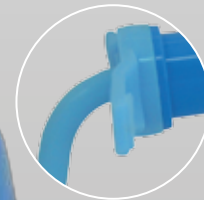

Nuevo ángulo. Evita la acumulación de mucosidad y facilita la aspiración de secreciones.

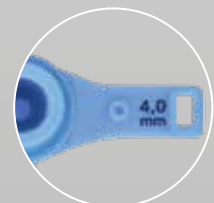

Conector universal de 15 mm (permite la adaptación al respirador mecánico). Información de diámetro interno.



Punto para sutura y fijación de la cánula.

Código	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Pediátrico	
			Longitud total (mm)	
			Cánula corta	Cánula estándar
270-12	4,00	2,50	28,00	38,00
270-14	4,70	3,00	30,00	39,00
270-16	5,30	3,50	32,00	40,00
270-18	6,00	4,00	34,00	41,00
270-20	6,70	4,50	36,00	42,00
270-22	7,30	5,00	38,00	44,00

La versión corta se identifica con \*2 al final de la codificación. Ej: 270-12\*2

